

THERAGUN mini

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZACZYNAAMY

Krok 1

Uruchamianie

Aby włączyć Theragun Mini, mocno naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk zasilania/prędkości z boku urządzenia, a następnie użyj Theragun Mini na obszarach, które chcesz leczyć. W razie potrzeby użyj od lekkiego do umiarkowanego nacisku.

Krok 2


Pobierz aplikację Therabody

Poprowadzimy Cię przez bezstresową konfigurację i pokażemy, jak najlepiej ją wykorzystać.

Krok 3

Poczuj różnicę. Codziennie.

Weź głęboki oddech i oddaj się predefiniowanym zabiegom z przewodnikiem lub trybowi Freestyle. To wszystko jest zaprojektowane dla Ciebie.

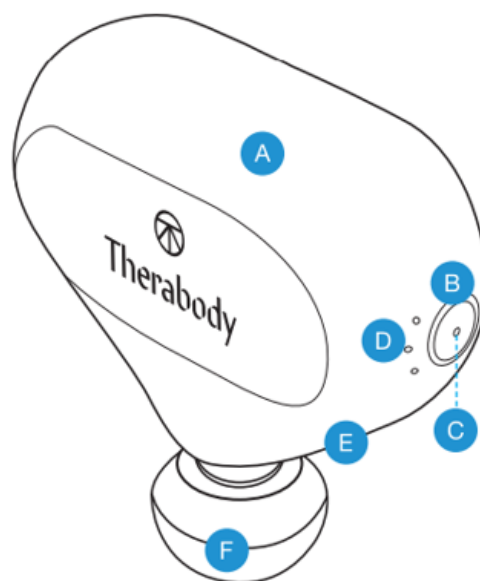

A Ergonomiczny uchwyt

B Wielofunkcyjny przycisk zasilania/szybkości

C Wskaźnik LED baterii

D Wskaźnik LED prędkości

E Gniazdo ładowania USB-C


F Wymienne

Korzystanie z Theragun Mini

1. Aby włączyć Theragun Mini, mocno naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk zasilania/prędkości znajdujący się po prawej stronie urządzenia.
2. Przesuwaj urządzenie nad obszarami wymagającymi leczenia i w razie potrzeby stopniowo delikatnie dociskaj.
3. Naciśnij ponownie przycisk zasilania/prędkości, aby przełączać między 3 prędkościami.
4. Aby wyłączyć Theragun Mini, mocno naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/prędkości, aż urządzenie się wyłączy.

Przylączanie nasadek

1. Wyrównaj nasadkę z końcówką i naciśnij, aby połączyć. Aby zdjąć, chwyć nasadkę i umieść po 1 palcu z każdej strony.
2. Zdejmij nasadkę.

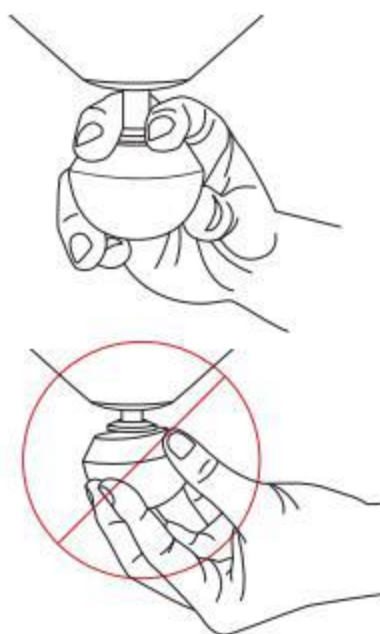

Ładowanie Theragun Mini

1. Theragun Mini obsługuje USB-C. Aby naładować, po wyłączeniu urządzenia podłącz jeden koniec dołączonego kabla do urządzenia USB, a drugi koniec do urządzenia.
2. Dioda LED na przycisku zasilania/prędkości będzie migać do momentu pełnego naładowania.
3. Ładowanie jest zakończone, gdy dioda LED na przycisku zasilania/prędkości zacznie świecić na zielono.
4. Poziom naładowania baterii jest stale wyświetlany na diodzie LED przycisku zasilania/prędkości, gdy urządzenie jest włączone.
5. Aby wyświetlić poziom naładowania baterii, gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania/prędkości, a dioda LED baterii zacznie migać, wskazując poziom naładowania baterii.

Poziom baterii

Poziom naładowania baterii Theragun Mini jest oznaczony następującymi kolorami:

-  Miga na pomarańczowo: niski poziom naładowania baterii
-  Miga na niebiesko: naładowana w połowie
-  Miga na zielono: wysoki poziom naładowania baterii
-  Świeci na zielono: w pełni naładowana

Czyszczenie Theragun Mini

Aby zapewnić jak największą higienę, dezynfekuj Theragun Mini po każdym użyciu:

1. Przetrzyj urządzenie ściereczką dezynfekującą, aby usunąć wszelkie pozostałości.
2. Gdy urządzenie jest wolne od pozostałości, zdezynfekuj powierzchnię za pomocą nowej ściereczki, wycierając wszystkie boki ruchem w dół.

Inteligentne funkcje

Twój Theragun Mini to inteligentne urządzenie z łącznością Bluetooth do bezproblemowego parowania z aplikacją Therabody. Gdy pobierzesz aplikację, przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces konfiguracji i pokażemy, jak sparować urządzenie. Po sparowaniu z urządzeniem aplikacja może zdalnie regulować prędkość i aktywować preferencje leczenia z przewodnikiem oraz wydawać zalecenia w czasie rzeczywistym na podstawie sposobu użytkowania.

Zeskanuj kod QR



Akcesoria

Twój Theragun Mini jest dostarczany z 3 nasadkami zaprojektowanymi w celu lepszego dostosowania leczenia.

- Wykonane z wygodnej pianki PU o zamkniętych komórkach
- Łatwe do czyszczenia
- Nie wchłania potu, balsamów ani olejków



Standard
Ball

Standard Ball – Bardziej ukierunkowana opcja do ogólnego użytku. Standardowa nasadka jest specjalnie zaprojektowana do ogólnego użytku na dużych i małych grupach mięśniowych.



Dampener

Dampener – Do obszarów wrażliwych i do ogólnego użytku. Nasadka Dampener została specjalnie zaprojektowana do ogólnego użytku i zabiegów o niskim wpływie wokół wrażliwych obszarów. Jego szeroka podstawa maksymalizuje powierzchnię dla coraz efektywniejszego kontaktu z ciałem.



Thumb

Thumb – Dla punktów spustowych i dolnej części pleców. Specjalnie zaprojektowana, aby naśladować prawdziwy ludzki kciuk.